

Como colocar o EPI corretamente?

1 Higienize as mãos por pelo menos 20 segundos



2 Coloque a máscara N95/PFF2 com os elásticos no meio da cabeça e pescoço, molde pinça nasal e verifique se está com boa vedação.



3 Coloque os óculos de proteção sobre a máscara e ajuste-o.




4 Coloque a *face shield*, adaptando-a na face e cabeça.



5 Coloque o gorro ou touca cobrindo toda a cabeça, cabelos, orelhas e elásticos da face shield.



6 Coloque o avental cobrindo totalmente o tronco; do pescoço aos joelhos. Amarre na parte de trás do pescoço e na cintura.

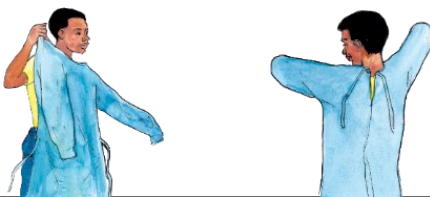


7 Coloque as luvas de procedimento cobrindo punhos/extremidade do avental.



Como retirar o EPI corretamente?

- 1** Retire luvas e avental. Puxe o avental para longe do corpo, rasgando as amarras. Enrole o avental de modo que a parte contaminada fique para dentro. Remova as luvas, deixando-as na parte interna do avental enrolado. Descarte no lixo contaminado.

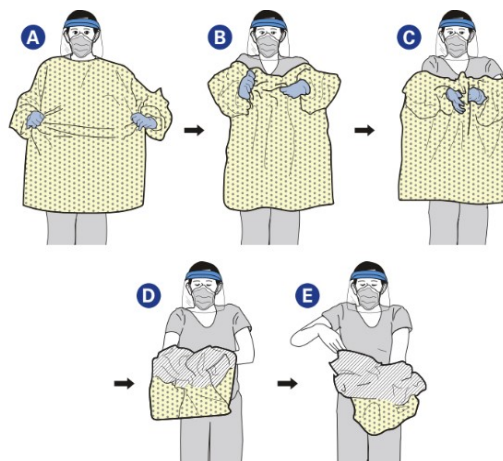

- 2** Retire a touca/gorro de trás para frente. Descarte no lixo contaminado.



- 3** Retire a *face shield*, Levantando o elástico da cabeça, sem tocar na superfície externa. Separe para higienização.



- 4** Retire óculos de proteção, removendo-os sem tocar na superfície externa.

Separe para higienização.



- 5** Retire a máscara N95/PFF2, Levante os elásticos inferior e superior e remova a máscara sem tocar no exterior. Guarde em envelope.



- 6** Higienize a *face shield* e os óculos de proteção com água e sabão e em seguida desinfecte com álcool 70%.

Se a *face shield* for de acetato, não poderá ser utilizado álcool para desinfecção.

Entre cada etapa, higienize as mãos usando álcool 70% ou lave as mãos com água e sabão.